



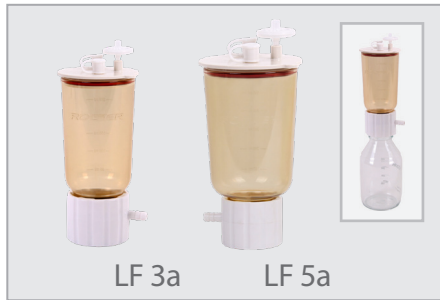

影片介紹

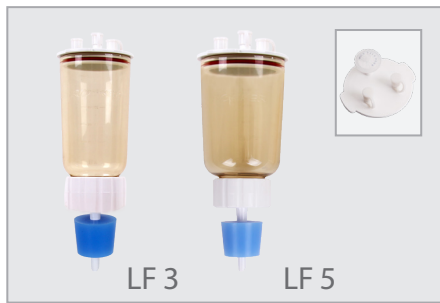

PES 旋卡式過濾漏斗

特性




- ▶ 專利旋卡扣緊方式 (M381450)，快速、牢固、不需夾具
- ▶ PES 工程塑膠射出成型，耐摔、耐高溫 (180°C)，可高溫高壓滅菌
- ▶ 濾膜墊片設計導流溝，可增進過濾速率
- ▶ 可重複使用，減少資源浪費，節省經費
- ▶ LF 3 / 5 附 8 號矽膠塞，可搭配各種接收瓶
- ▶ LF 3a / 5a 專利雙向結合設計 (M429664) 可搭配多種 GL45 血清瓶

規格




材質	LF 3 / LF 5	LF 3a / LF 5a
過濾杯	PES	PES
過濾基座	PC	PC
濾膜墊片	PP	PP
過濾杯蓋	PP	PP
過濾杯蓋孔塞	Silicone	Silicone
針頭式過濾器	PTFE	PTFE

規格

漏斗容積	300 mL / 500 mL	300 mL / 500 mL
濾膜直徑	47 mm	47 mm
有效過濾面積	12.5 cm ²	12.5 cm ²
針頭式過濾器	25 mm, 0.2 μm	25 mm, 0.2 μm
適用軟管內徑	-	ID8

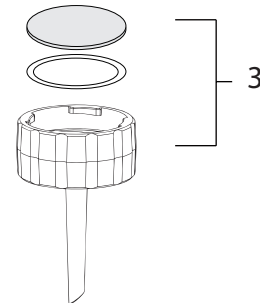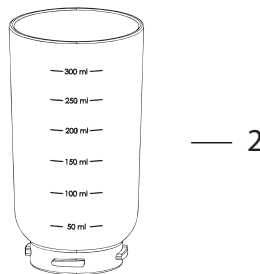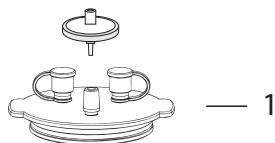

LF 3 / 5

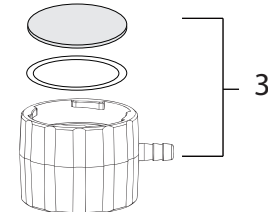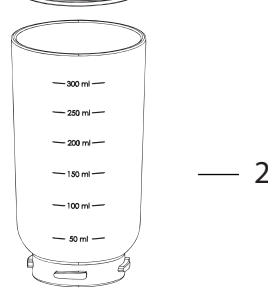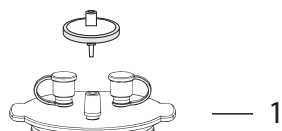

LF 3a / 5a

訂購資訊

LF 3, PES 旋卡式過濾漏斗 300 mL 197000-01

LF 5, PES 旋卡式過濾漏斗 500 mL 197000-06

1	PP 過濾杯蓋 (LF 3)	197000-36
	PP 過濾杯蓋 (LF 5)	200300-36
2	PES 旋卡式過濾杯 300 mL	197000-34
	PES 旋卡式過濾杯 500 mL	197000-56
3	PC 旋卡式過濾基座 47 mm	197000-35
4	8 號矽膠塞	167110-16

LF 3a, PES 旋卡式過濾漏斗 300 mL 197000-02

LF 5a, PES 旋卡式過濾漏斗 500 mL 197000-07

1	PP 過濾杯蓋 (LF 3a)	197000-36
	PP 過濾杯蓋 (LF 5a)	200300-36
2	PES 旋卡式過濾杯 300 mL	197000-34
	PES 旋卡式過濾杯 500 mL	197000-56
3	組織培養瓶轉接過濾座	197000-38