



GL45 抽氣轉接座

規格	GL45 抽氣轉接座
型號	197000-60
適用軟管內徑	ID6
轉接座材質	PP
蒸氣滅菌	Yes

應用範例

廢液瓶

將 GL45 血清瓶安裝於幫浦及過濾/抽吸套件之間，以收集實驗廢液。




水氣收集瓶

將乾燥劑裝入 GL45 血清瓶中，藉此吸收水氣。當水氣飽和時乾燥劑會變成粉紅色。




蒸氣吸收瓶 / 中和瓶

將實驗過程中產生的酸、鹼等化學氣體中和，防止其進入幫浦或擴散於空氣中。

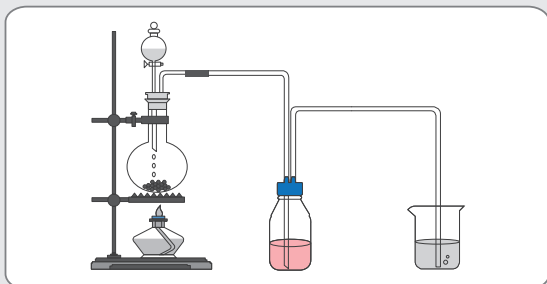

無菌分裝瓶

將儲存於 GL45 血清瓶中的無菌液，在密閉系統中藉由蠕動幫浦分裝至其它容器內。

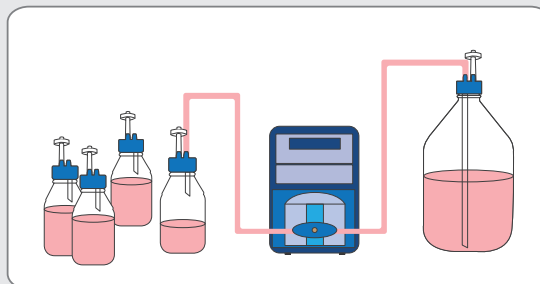

緩衝瓶

一般將 GL45 血清瓶安裝於幫浦前端，避免實驗溶液意外吸入幫浦。

