

無油式真空幫浦



觀看影片

2年

產品保固



Rocker 300

產品貨號 167300-11(22)



Rocker 300DC

產品貨號 167330-00



Rocker 400

產品貨號 167400-11(22)



Rocker 410

產品貨號 167410-11(22)

產品特色

▶ 體積小，無油汙

近乎裸機的輕巧外型，攜帶方便且不佔空間，無須潤滑油的活塞設計，不會產生油霧汙染，是實驗室內的最佳良伴。

▶ Prote™ 浮球防溢保護裝置

Rocker 系列幫浦內建 Prote™ 浮球濾芯組，降低幫浦意外抽入水溶液而造成損壞的可能性。

▶ 加強版吸震腳墊

升級加強版腳墊，可有效降低幫浦運轉時產生的振動，使 Rocker 系列馬達運作起來更安靜且穩定。

▶ 過熱保護裝置

Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。

▶ 進氣過濾裝置

Rocker 系列幫浦在進氣口均裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，延長腔體及活塞的使用年限。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

北美 CSA 認證 (不含 Rocker 300DC)


IP 30 防護等級 (不含 Rocker 300DC)

RoHS 認證

▶ 二年產品保固

產品應用

- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 空氣採樣

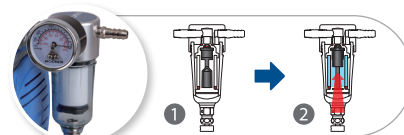

Prote™ 浮球防溢保護裝置

產品規格

型號	Rocker 300		Rocker 300DC	Rocker 400		Rocker 410	
技術數據							
最大真空度	99 mbar abs.		99 mbar abs.	99 mbar abs.		25 mbar abs.	
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	25 L/min	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8		ID8	ID8		ID8	
噪音值	50 dB		50 dB	52 dB		52 dB	
淨重	4.1 Kg		3.5 Kg	5.2 Kg		5.2 Kg	
尺寸 (LxWxH)	27 x 14 x 20 cm		27 x 12 x 17 cm	31 x 14 x 20 cm		31 x 14 x 20 cm	
電氣數據							
電壓	110V	220V	DC12V	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		-	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)	35W (1/8 HP)	100W (1/6 HP)	80W (1/6 HP)	100W (1/6 HP)	80W (1/6 HP)
耗電流	0.7A	0.3A	3.0A	1.0A	0.4A	1.0A	0.4A
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
其它							
配件	真空調壓閥 浮球濾芯組		真空調壓閥 浮球濾芯組	真空調壓閥 浮球濾芯組		真空調壓閥 浮球濾芯組	