

無油式真空壓力幫浦




觀看影片



Rocker 430

產品貨號 167430-11(22)

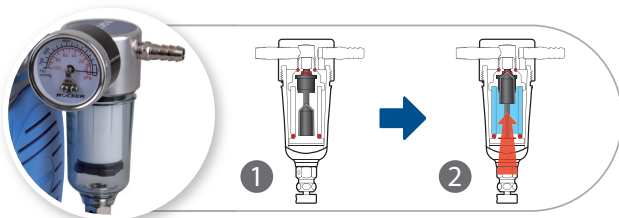

Prote™ 浮球防溢保護裝置

產品特色

▶ 正壓 / 負壓，雙功能

Rocker 430 結合真空幫浦和空壓機功能，兩側附有真空錶 / 壓力錶及調壓裝置，可監控、調節真空度及輸送的壓力，應用範圍更加廣泛。

▶ 無污染、免保養

Rocker 430 利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧污染的問題。

▶ Prote™ 浮球防溢保護裝置

Rocker 430 內建 Prote™ 浮球濾芯組，以降低幫浦意外抽入液體而造成損壞的可能性。

▶ 過熱保護裝置

Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。

▶ 進出氣過濾裝置

Rocker 430 在進氣與出氣口裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，以淨化進氣，延長汽缸及活塞的使用年限。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

IP 30 防護等級

RoHS 認證

▶ 二年產品保固

產品應用

- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 空氣採樣
- ▶ 正壓過濾

產品規格

型號	Rocker 430			
技術數據			電氣數據	
最大真空度	145 mbar abs.		電壓	110V 220V
最大壓力	80 psig		頻率	50 / 60Hz
最大流量	34 L/min @60Hz	28 L/min @50Hz	最大功率	147W (1/6 HP) 125W (1/6 HP)
適用軟管內徑	ID8		耗電流	1.5A 0.6A
噪音值	52 dB		安全性	過熱保護裝置
淨重	5.5 Kg		其它	
尺寸 (LxWxH)	25 x 24 x 20 cm		配件	真空 / 壓力調節閥、浮球濾芯組