

MF 磁式過濾漏斗



MF 3 Pro MF 5 Pro



MF 3a Pro MF 5a Pro


產品特色

- ▶ 獨特磁力設計，在高度密封性下仍能單手操作
- ▶ 側邊真空接頭設計，能搭配各式廢液瓶、血清瓶、真空瓶
- ▶ 過濾基座有定位環設計，放置濾膜時能快速定位
- ▶ 過濾基座有濾膜夾口設計，方便夾取、濾膜不破損
- ▶ PPSU (Polyphenylsulfone) 材質，展現比 PES 材質更佳的耐熱性及耐化學性
- ▶ 刻度體積誤差 $\leq 2.5\%$ @ 最大刻度
- ▶ 國際認證：RoHS 認證

推薦用於頻繁高溫高壓滅菌之應用，如製藥及生技實驗室

產品規格

型號	MF 3 Pro / MF 5 Pro	MF 3a Pro / MF 5a Pro
材質		
過濾杯	PPSU	PPSU
過濾基座	PPSU	PPSU
濾膜墊片	PPSU	PPSU
過濾杯蓋	PP	PP
側邊接頭	PPSU	PPSU
過濾杯蓋孔塞	矽膠	矽膠
規格		
漏斗容積	300 mL / 500 mL	300 mL / 500 mL
濾膜直徑	47 mm	47 mm
有效過濾面積	13.1 cm ²	13.1 cm ²
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8
漏斗刻度	50 mL	50 mL

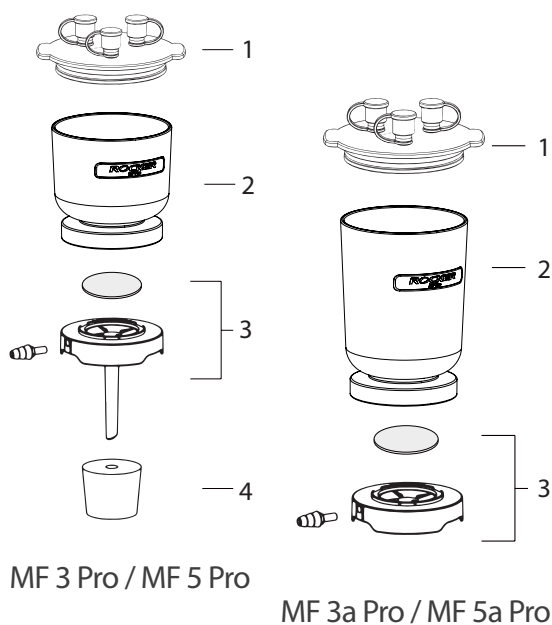

相關訂購資訊

MF 3 Pro, PPSU 磁式過濾漏斗 300 mL 200300-01-P

MF 5 Pro, PPSU 磁式過濾漏斗 500 mL 200500-01-P

1	PP 過濾杯蓋	200300-36
2	PPSU 磁式過濾杯 300 mL	200300-30-P
	PPSU 磁式過濾杯 500 mL	200500-30-P
3	PPSU 磁式過濾基座	200300-32-P
4	8 號矽膠塞	167110-16

MF 3a Pro, PPSU 磁式過濾漏斗 300 mL 200310-01-P

MF 5a Pro, PPSU 磁式過濾漏斗 500 mL 200510-01-P

1	PP 過濾杯蓋	200300-36
2	PPSU 磁式過濾杯 300 mL	200300-30-P
	PPSU 磁式過濾杯 500 mL	200500-30-P
3	PPSU 磁式過濾基座 (短版)	200310-32-P