

ROCKER

## 不鏽鋼多連過濾座




觀看影片



## MultiVac 301 - MB

產品貨號 180301-02

含 SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL x 3

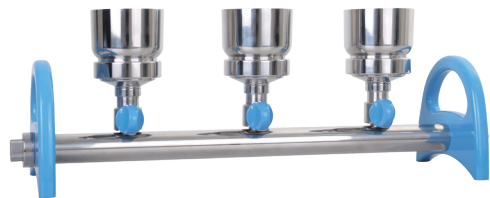

## MultiVac 601 - MB

產品貨號 180601-02

含 SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL x 6



可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

## 產品特色

## ► 極速拆裝設計

MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

## ► SS316 不鏽鋼材質，堅固耐用

MultiVac 301 / 601 - MB 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。

## ► Quick-Fit 接頭設計

MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，符合各實驗室的設置需求。

## ► 可調式補氣閥

可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。

## ► 獨立控制開關

MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

## ► SS316 不鏽鋼過濾漏斗

MultiVac 301 / 601 - MB 標配 100 mL SF 不鏽鋼過濾杯，可火焰滅菌，加速微生物檢測流程。

## ► 二年產品保固

## 產品應用

- 微生物檢測
- 水中懸浮固體檢測
- 實驗室真空過濾

## 相關訂購資訊

產品 / 配件	產品貨號
SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL	180100-01
SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL	180100-03
SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL	180100-05

## 產品規格

型號	MultiVac 301 - MB	MultiVac 601 - MB
過濾孔數	3	6
適用濾膜直徑	47 mm	47 mm
搭配過濾杯容量	100 mL	100 mL
適用軟管內徑	ID8	ID8
淨重	3.7 Kg	6.6 Kg
尺寸 (LxWxH)	48 x 13 x 14 cm	85 x 13 x 14 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS316	SS316
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾杯轉接座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接頭 / 補氣閥	SS316	SS316
手把 / 旋鈕	鋁合金	鋁合金
濾杯	SS316	SS316
O-ring	FKM · 矽膠	FKM · 矽膠

\* 濾液經過材質為鋁合金、FKM