

SEC 管柱 (Size-exclusion chromatography column)

產品特色

粒徑篩析層析法 (SEC) 又稱凝膠過濾層析法，是基於分子大小與形狀進行分離的方法。

SEC 方法操作簡單、快速、能有效的將 EVs 與循環蛋白 (circulating proteins) 分離，且已被證明能保留 EVs 結構完整性、功能及活性。



SEC 管柱


- ▶ 簡單、快速，15 分鐘完成
- ▶ 可清洗及重複使用
- ▶ 穩定、易保存 (4°C)



SEC 濃縮離心管

- ▶ 簡單、快速，5 分鐘完成
- ▶ 可重複使用多達 3 次
- ▶ 穩定、易保存 (4°C)

SEC 管柱操作流程

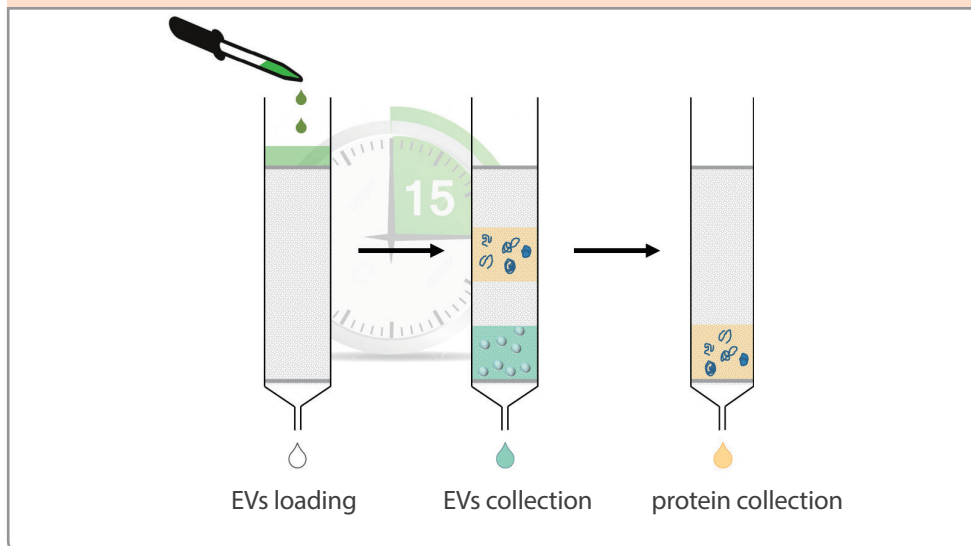

產品規格

產品貨號	適用體積	包裝	說明
miniPURE-EVs, SEC 管柱			
HBM-mPEV-10	100 μ L ~ 500 μ L	10 Columns	
HBM-mPEV-20	100 μ L ~ 500 μ L	20 Columns	
PURE-EVs, SEC 管柱			
HBM-PEV-5	500 μ L ~ 2 mL	5 Columns	
HBM-PEV-10	500 μ L ~ 2 mL	10 Columns	
maxiPURE-EVs, SEC 管柱			
HBM-mxPEV-3	1 mL ~ 20 mL	3 Columns	
HBM-mxPEV-6	1 mL ~ 20 mL	6 Columns	
miniPURE-EVs Spin, SEC 濃縮離心管			
HBM-mPEVS-12	20 μ L ~ 200 μ L	12 Columns	
HBM-mPEVS-24	20 μ L ~ 200 μ L	24 Columns	